




# 薬ディスペンサー WMD1201



# 製品紹介

## ボタン/LED

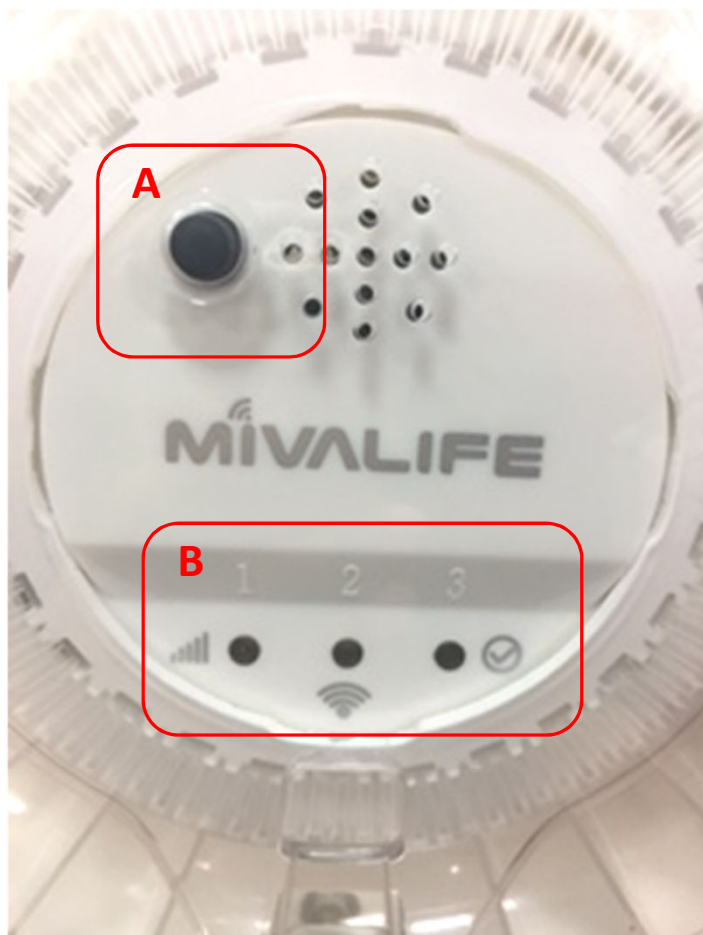

### A. 同期ボタン

### B. LED

#### 1 : Wi-Fi信号強度

信号強度が70db未満になると、LEDが赤く点灯します。

#### 2 : Wi-Fi接続状態


接続が確立されると、LEDは緑に点灯します。

#### 3 : 動作および状態

薬の服用時間が来ると、3秒置きに点滅します。アクティベーション準備完了で、LEDは毎秒点滅します。

## ご注意

1. まず電池を装着してください。LED 2が点灯し、LED 3が毎秒点滅します。
2. スムーズな通信には、OPU/シャトルのそばでディスペンサーのアクティベーションを行うようお勧めします。

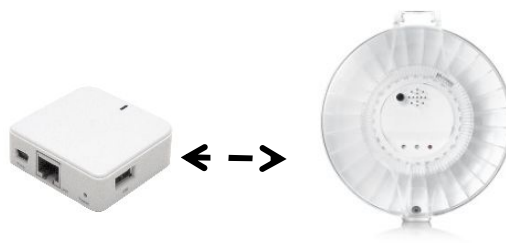


# アクティベーション

1




2

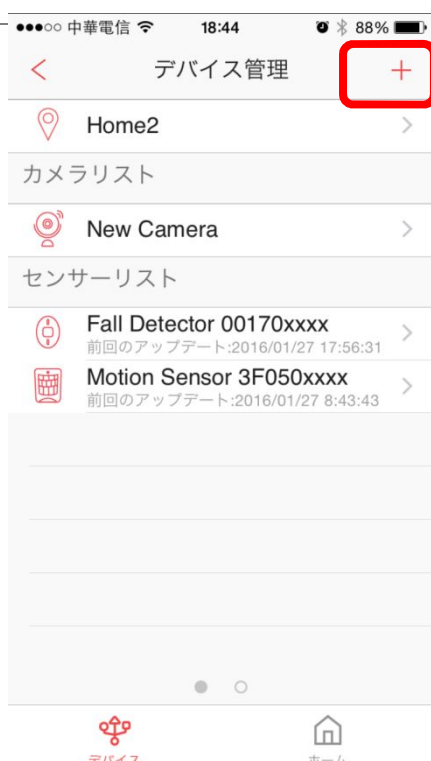

3




アプリを起動し、サイドバーメニューをタップ、「デバイス管理」、右上の「+」をタップしてから「センサー」を選びます。

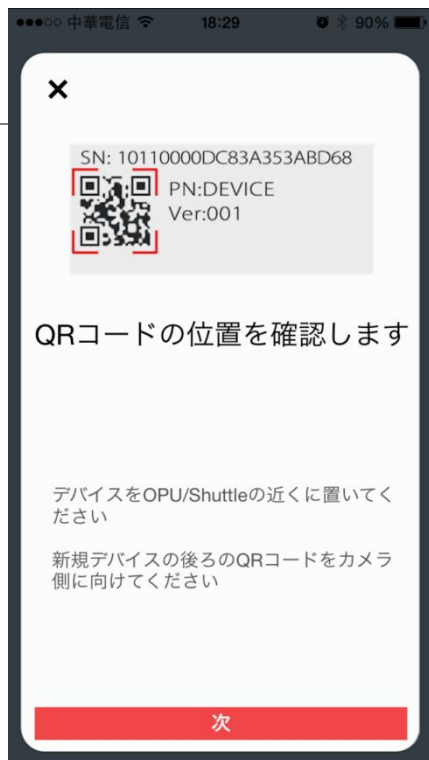

ディスペンサー底部のQRコードをスキャンします。  
QRコードのスキャン後、アクティベーションのため1分ほど待ちます。



一度、医療用ディスペンサーがシステムに追加されると、LED 1および2が約1秒間点灯します。

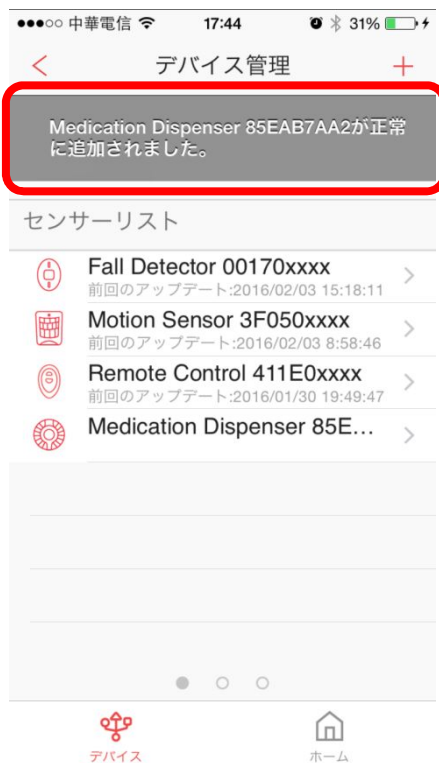

アプリには、「医療用ディスペンサーXXXが正常に追加されました」と表示されます。

詳細なご使用方法はお問い合わせください。

輸入元:(株)ライコム

〒231-0825 神奈川県横浜市中区本牧間門36-13

電話:045-628-3853 FAX045-628-3858

お問い合わせ:弊社ホームページより

<http://www.kklicom.co.jp/>